

Dr. pen

Auto Microneedle System: 



®



Instrukcja obsługi **A11**

Przeczytaj instrukcję przed użyciem pena



Opis produktu

Urządzenie składa się z elektrycznego pena do mikronakłuwania, indukcyjnej bazy oraz jednorazowych kartridży z igłami. Niniejsza instrukcja wyjaśnia szczegółowo, jak korzystać z każdego z elementów.

Urządzenie służy do poprawy wyglądu skóry i redukcji oznak starzenia. Jego zadaniem jest stymulacja skóry za pomocą mikroigieł w celu pobudzenia produkcji kolagenu i elastyny. Tworzone przez urządzenie mikrokanały w powierzchniowych warstwach skóry pomagają również w lepszej absorpcji serum pielęgnacyjnych.

Do urządzenia zaprojektowano 7 różnych typów kartridży z igłami. Mogą być one używane zarówno do zabiegów mikronakłuwania, jak i nano-nakłuwania.



Nazwy elementów



① Złącze zasilania

② Wyświetlacz prędkości

③ Regulacja prędkości

④ Przycisk zasilania
Start/Pauza

⑤ Baza indukcyjna

⑥ Skala

⑦ Pierścień regulacji

⑧ Kartrydż



Tryb bezprzewodowy

To urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią i może pracować bezprzewodowo. Kabel zasilający oraz adapter służą do ładowania urządzenia, gdy bateria jest rozładowana.



Jak ładować baterię

Podłącz kabel zasilający z adapterem do portu zasilania urządzenia, a następnie włóż adapter do działającego gniazdka AC, aby rozpocząć ładowanie. Pełne naładowanie trwa około 3 godzin.

Numer prędkości miga powoli, gdy poziom naładowania baterii spada do 10%.

Po szybkim miganiu numeru prędkości przez 1 minutę urządzenie automatycznie się wyłączy.



Pen wskazuje “” gdy restart po automatycznym wyłączeniu ad niski poziom naładowania.


Pen wskazuje kręcące “” podczas ładowania .

Pen wskazuje “” koniec ładowania.




Montaż kartridża

1. Wyjmij kartridż z igłami ze sterylnego opakowania. (Rys. 1)

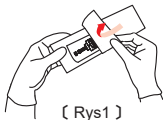

2. Znajdź wcięcie w kształcie litery „U” na kartridżu, wyrównaj je z kropką na spodzie urządzenia i delikatnie wsuń kartridż do urządzenia. (Rys. 2)

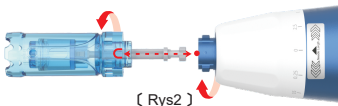

3. Zablokuj kartridż, przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4. Aby wyjąć kartridż, przekręć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij.

5. Włączaj urządzenie tylko wtedy, gdy kartridż został prawidłowo zamocowany. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Przed montażem lub demontażem kartridża upewnij się, że punkt w kształcie „U” na kartridżu jest wyrównany z oznaczeniem na rękojeści.

Kartridż jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zużyte kartridże wyrzucaj do pojemnika na odpady. Jeśli kartridż zostanie przypadkowo zanieczyszczony podczas instalacji (np. upadnie na podłogę, opakowanie będzie otwarte lub uszkodzone), należy go wyrzucić i użyć nowego.



Regulacja wysuwu igły

Używaj odpowiedniego rodzaju kartridża z igłami w zależności od obszaru zabiegowego i rodzaju problemów skórnych.

Dostosuj głębokość igieł, obracając pierścień regulacji skali. Regulacji głębokości należy dokonywać po uruchomieniu urządzenia. Liczba na skali ustawiona naprzeciw punktu odniesienia wskazuje aktualną głębokość igły. [Fig3]



[Fig3]



Speed display and adjustment

Wyświetlacz prędkości



Regulacja 6 prędkości

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po uruchomieniu urządzenia prędkość zmienia się o jeden poziom przy każdym naciśnięciu przycisku zasilania.



Baza indukcyjna

Po włączeniu urządzenia:

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania uruchamia lub zatrzymuje pracę urządzenia.

Stan pracy:

Światło przycisku zasilania świeci ciągłym światłem.

Stan oczekiwania:

Światło przycisku zasilania miga ciągle.

W stanie pracy urządzenie automatycznie zatrzyma działanie, gdy zostanie odłożone na indukcyjną bazę.



W stanie pracy urządzenie automatycznie wznowi pracę po zdjęciu z indukcyjnej bazy.





Kartridże

Dostępne kartridże



12 Needles



24 Needles



42 Needles



R NANO
Needles



S NANO
Needles



Uwaga

Kartridż z igłami jest jednorazowy. Kartridże z igłami są przeznaczone wyłącznie do modelu Dr.pen A11.

Przed użyciem wysterylizuj kartridż, zanurzając go na kilka minut w 75% alkoholu.

Zużyty kartridż wyrzucić do pojemnika na odpady.





Karta referencyjna

OBSZAR	GLĘBOKOŚĆ (mm)
Czoło	0.25 - 0.5
Miedzy brwiami	0.25 - 0.5
Nos	0.25
Wokół oczodołu	0.25
Policzki i broda	0.5 - 1.0
Blizny i pooperacyjne max	2.5



Specyfikacja

Nazwa produktu :

Auto-stamp Motorized Meso Machine

Model : Dr.pen A11

Zasilacz

Input : 100-240V 50-60HZ Output : 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Waga z opakowaniem : 625 g

Rozmiar opakowania : 194*146*67 mm

Zawartość

Element	Ilość
Rączka	1 szt.
Zasilacz	1 szt.
Instrukcja	1 szt.
Kabel	1 szt.
Kartridż	2 szt.
Baza indukcyjna	1 szt.



Ostrzeżenia

	Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.
	Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób: 1. Które mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 ° C 2. Które mają alergię i hemofilię 3. Które mają melanozę twarzy 4. Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne 5. Które regularnie odwiedzają szpital 6. Które przyjmują leki 7. Które mają mniej niż 12 lat
	Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie
	Nie należy używać w pobliżu miejsc o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotności (W pobliżu nawilzacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
	Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
	Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
	Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego. Może to spowodować pożar (Należy go wymienić na inny).
	Nie używaj przewodu, który ma pęknięcia lub przetarcia. Może powodować prerażenie skóry.
	Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.
	Przeprowadzaj kontrolę urządzenia. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek problemy, napraw je.
	Nikt inny niż operator nie może dotykać urządzenia. Może to spowodować wypadek lub awarię.

	Prąd przemienny		Numer seryjny
	Prąd stały		Reprezentacja UE
	Sprzęt klasy II		Symbol CE
	Uwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi		Producent
	Data produkcji		Zastosowana część plywająca



Gwarancja

1. Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
2. W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z www.permanent24.pl
3. Zapewniamy serwis urządzenia w przeciągu od 1 do 14 dni od chwili otrzymania urządzenia wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Nie objęte gwarancją są: uszkodzenia mechaniczne, złamanie kabla, przepalenie zasilacza.



Importer

Importer: TRADERON Sp. z o.o.
ul. Cypryjska 70, 02-761 Warszawa, Polska
VAT: PL9512498344

