



Dr. pen® M9

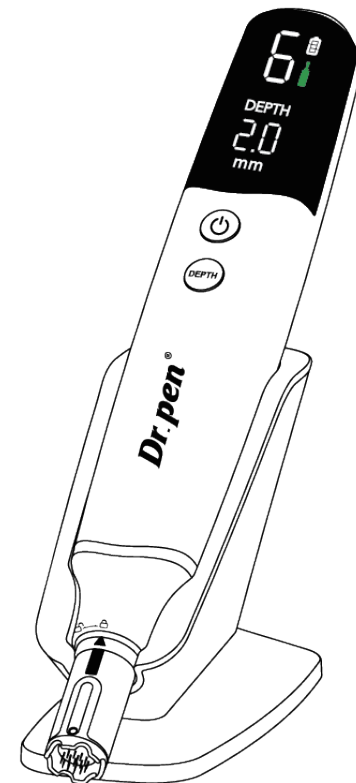

Instrukcja obsługi

 Przeczytaj instrukcję przed użyciem pena

Elementy zestawu

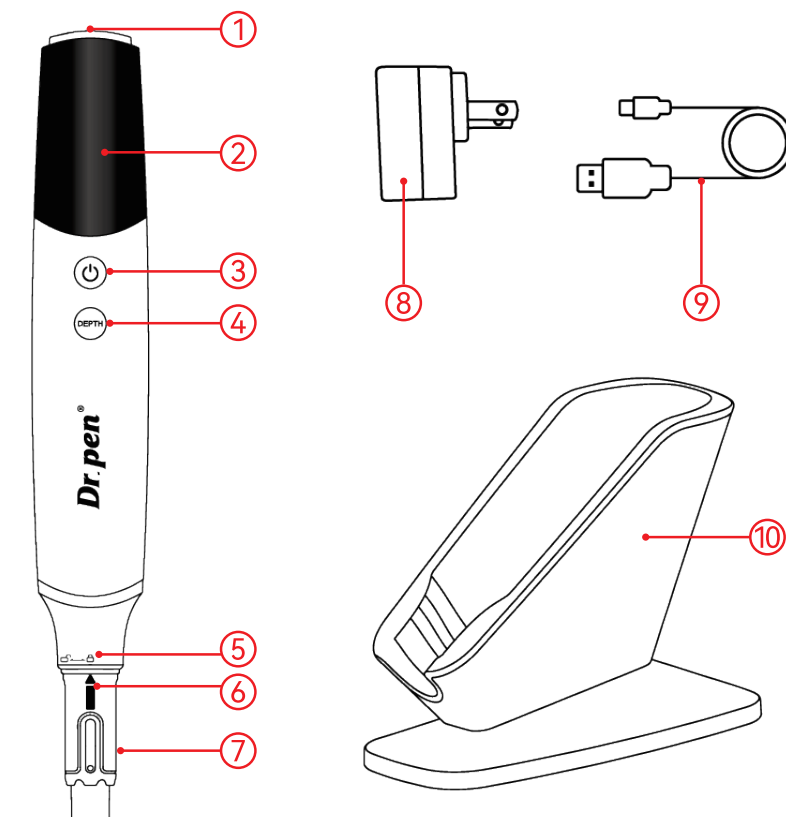


- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ① Złącze zasilania | ② Wyświetlacz cyfrowy |
| ③ Start / Prędkość | ④ Ustawienia głębokości kartridża |
| ⑤ Wskaźnik zablokowania | ⑥ Wskaźnik/strzałka kartridża |
| ⑦ Kartridż | ⑧ Zasilacz |
| ⑨ Kabel | ⑩ Podstawa |

Obsługa

Cyfrowy wyświetlacz

Cyfrowy ekran na bieżąco dostarcza informacji o ustawieniach urządzenia:

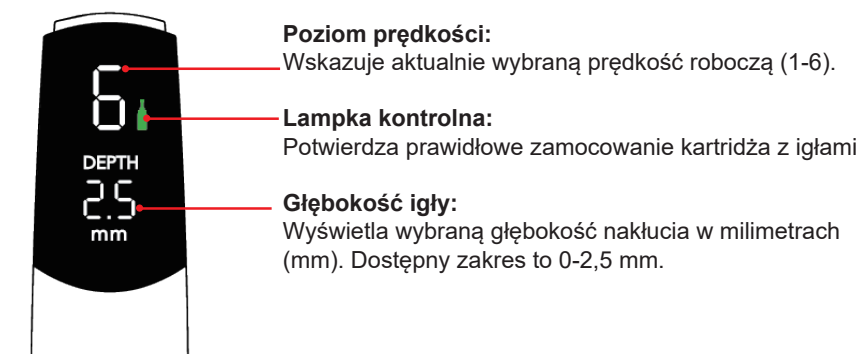

Poziom prędkości:

Wskazuje aktualnie wybraną prędkość roboczą (1-6).

Lampka kontrolna:


Potwierdza prawidłowe zamocowanie kartridża z igłami.

Głębokość igły:

Wyświetla wybraną głębokość nakłucia w milimetrach (mm). Dostępny zakres to 0-2,5 mm.

Zasilanie i ładowanie:

- Urządzenie jest zasilane za pomocą wbudowanego akumulatora.
- Pen musi zostać naładowany, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Pełny cykl ładowania trwa około 3 godzin.
- Ekran wyświetlacza informuje o statusie ładowania, niskim poziomie baterii oraz całkowitym rozładowaniu.

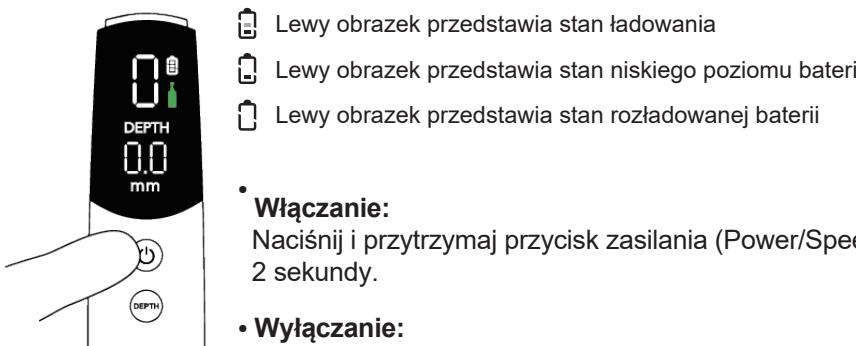

 Lewy obrazek przedstawia stan ładowania

 Lewy obrazek przedstawia stan niskiego poziomu baterii

 Lewy obrazek przedstawia stan rozładowanej baterii

• Włączanie:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (Power/Speed) przez 2 sekundy.

• Wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/prędkości przez 2 sekundy.

Obsługa

Mocowanie kartridża:

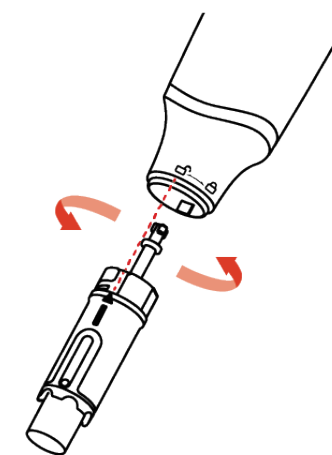

1. Zlokalizuj wskaźnik odblokowania na urządzeniu.
2. Znajdź wskaźnik ze strzałką na kartridżu. Zrównaj kartridż do mikroigłowania ze wskaźnikami odblokowania na urządzeniu, upewniając się, że jest on prawidłowo skierowany w stronę wskaźnika na urządzeniu.

3. Delikatnie wciśnij kartridż do gniazda.

4. Zabezpiecz kartridż, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż bezpiecznie zablokuje się na swoim miejscu.

Wskazania statusu:


- Zielona lampka kontrolna potwierdza, że kartridż jest oryginalny i został prawidłowo zamontowany.

- Czerwona lampka kontrolna oznacza, że kartridż jest nieprawidłowo zamontowany lub jest to element nieoryginalny (podróbka).

Demontaż:


- Aby odłączyć kartridż, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij.

Uwaga: Ważne jest, aby wybrać kartridż z igłami odpowiedni dla konkretnego obszaru zabiegowego i rozwiązywanego problemu skórniego.

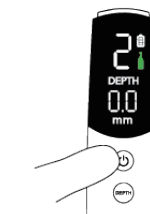

Regulacja poziomu prędkości:


- Urządzenie jest wyposażone w 6 poziomów prędkości.
- Po włączeniu urządzenia, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania/prędkości (Power/Speed) spowoduje przełączanie między dostępnymi ustawieniami prędkości.

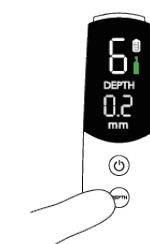

Regulacja głębokości igły:

- Naciśnij przycisk ustawiania głębokości igły, aby wyregulować głębokość nakłucia.
- Ustawienie głębokości zaczyna się od 0 mm.
- Każde naciśnięcie przycisku zwiększa głębokość igły w krokach co 0,2 mm.
- Maksymalna głębokość igły wynosi 2,5 mm.

Dostępne kartridże

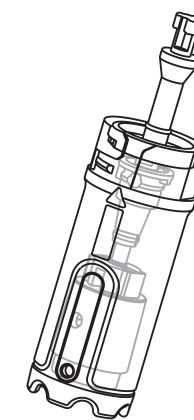

18
Igłel



36
Igłel



42
Igłel



R Nano
Igły

Gwarancja

1. Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
2. W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z www.permanent24.pl
3. Zapewniamy serwis urządzenia w przeciągu od 1 do 14 dni od chwili otrzymania urządzenia wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Nie objęte gwarancją są: uszkodzenia mechaniczne, złamanie kabla, przepalenie zasilacza.

Importer

Importer: TRADERON Sp. z o.o.
ul. Cypryjska 70, 02-761 Warszawa, Polska
VAT: PL9512498344

 Permanent 24.pl